




COOL GLAMOR™ 7D 360° Criolipólisis

¡4 APLICADORES TRABAJAN SIMULTÁNEAMENTE!

- Varios aplicadores para cualquier lugar
- Gama ampliable de aplicadores para todas las necesidades
- Intercambio de aplicadores rápido y sencillo
- Cualquier área de tratamiento en cualquier ángulo
- Refrigeración **360°** envolvente mejorada
-  **Sistema de control Android**

Freeze ON Fat OFF!

 **COOL GLAMOR™ 7D 360° Criolipólisis**

360°



- 

1
Wing Mini Taza
- 

2
Flat Mini Taza
- 

3
Flat Taza
- 

4
Wing Taza
- 

5
Wing Plus Taza
- 

6
Wing Max Taza
- 

7
ARC-T Taza

¿Por qué elegir el tratamiento de congelación de grasas con criolipólisis?

★ Sin efecto rebote: Los resultados obtenidos mediante la criolipólisis son sostenibles y no hay tendencia a que la grasa regrese después del tratamiento.

✅ La diferencia entre reducción de grasa y pérdida de peso.

Es un error común pensar que perder peso y reducir grasa son lo mismo. Ellos no están. Cuando perdemos peso, nuestras células grasas se vuelven más pequeñas, pero la cantidad de células grasas sigue siendo la misma. Cuando aumentamos de peso, esas células grasas vuelven a crecer. 🖐 Sin embargo, el procedimiento Cryolipolysis Freeze en realidad reduce la cantidad de células grasas en las áreas tratadas. Obviamente, las células grasas que ya no existen no pueden crecer. A diferencia de la cirugía de pérdida de peso u otros procedimientos de pérdida de peso no quirúrgicos, los resultados del procedimiento de congelación con criolipólisis son duraderos debido a la composición genética del cuerpo, cada persona nace con una cierta cantidad de células grasas, una vez que se eliminan las células grasas, desaparecen. para siempre. Pese menos o no, estará más delgado y su ropa le quedará mejor, se sentirá mejor y se verá mejor. ❤️

¿Cómo funciona la criolipólisis COOL GLAMOUR™ 7D 360°?

Una tecnología patentada llamada **Cryolipolysis®** es el secreto detrás del éxito de **COOL GLAMOR™**. Investigadores de la filial docente de la Facultad de Medicina de Harvard descubrieron que las células grasas podían ser atacadas con frío extremo para inducir la lipólisis, la descomposición de las células grasas. La temperatura a la que se produce el enfriamiento es la clave de la tecnología, porque las células grasas son más sensibles al frío que el tejido circundante; En condiciones estrictamente controladas, las células grasas pueden congelarse mientras que otros tejidos, incluida la superficie de la piel, quedan ilesos. Las células grasas congeladas mueren y son eliminadas gradualmente por el sistema inmunológico del cuerpo.

Este proceso es el motivo por el cual COOL GLAMOR™ es eficaz:


Protege otros tejidos con aplicación específica. Debido a que **COOL GLAMOR™** puede atacar específicamente las células grasas sin afectar los tejidos circundantes, es un avance sobre otros métodos de reducción de grasa que utilizan calor intenso, ultrasonido enfocado o inyecciones químicas. Esta diferencia fundamental es importante porque prácticamente elimina cualquier riesgo de que la piel, los nervios o los músculos se dañen durante el tratamiento.



✦ ¿Cómo funciona la criolipólisis COOL GLAMOUR™ 7D 360°?

Resulta en una reducción permanente de las células grasas.

El tratamiento **COOL GLAMOUR™** elimina permanentemente las células grasas debido a la composición genética del cuerpo. Cada persona nace con una determinada cantidad de células grasas; Una vez que las células se eliminan del cuerpo, no regresan. Este principio también es una parte importante de por qué **COOL GLAMOUR™** es eficaz para reducir los bultos de grasa.

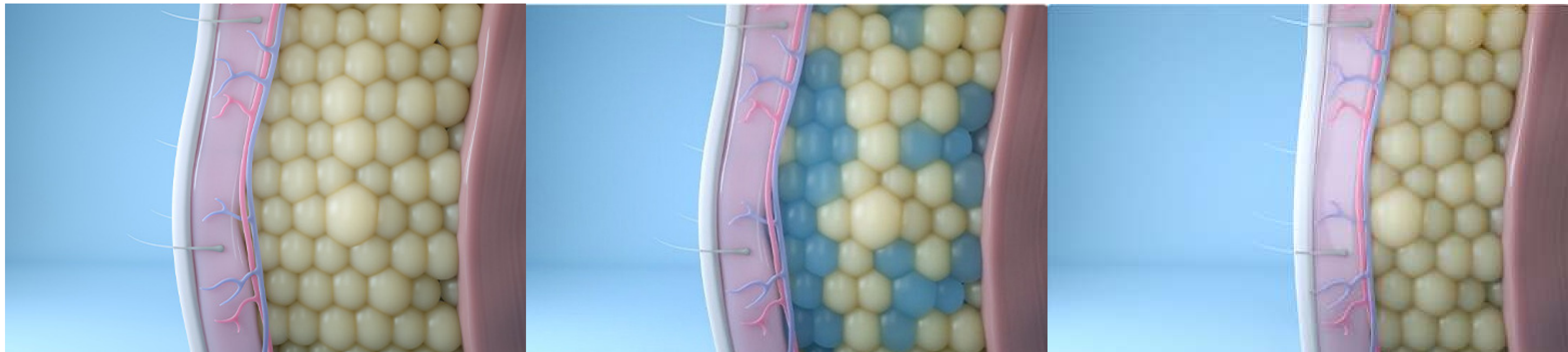


Muchos de nosotros tenemos grasa obstinada a pesar de la dieta y el ejercicio.

COOL GLAMOUR™ se dirige eficazmente a las células grasas debajo de la piel sin dañar la piel ni los tejidos circundantes. Las células grasas del tratamiento se congelan y luego mueren.


En las semanas siguientes, el cuerpo procesa y elimina naturalmente estas células grasas muertas. ¡Las ventosas de grasas tratadas han desaparecido para siempre!

- No invasivo – sin agujas
- Sin dolor, sin anestesia
- Sin efectos secundarios
- Resultados significativos (reducción del 10 al 30 % en los bultos tratados) después de 1 sesión (los resultados dependen de las personas)
- Efectos duraderos, en el tiempo. Las células grasas que se destruyen no vuelven...
- Tecnología probada en medicina estética
- Posibilidad de acoplar con la mayoría de tratamientos.
- La criolipólisis no implica ningún desalojo social y el cliente puede retomar su actividad normal inmediatamente.
- Esta técnica permite una reducción importante de la grasa, sin las complicaciones habituales de métodos más invasivos como la liposucción.

Refrigeración envolvente de 360° mejorada

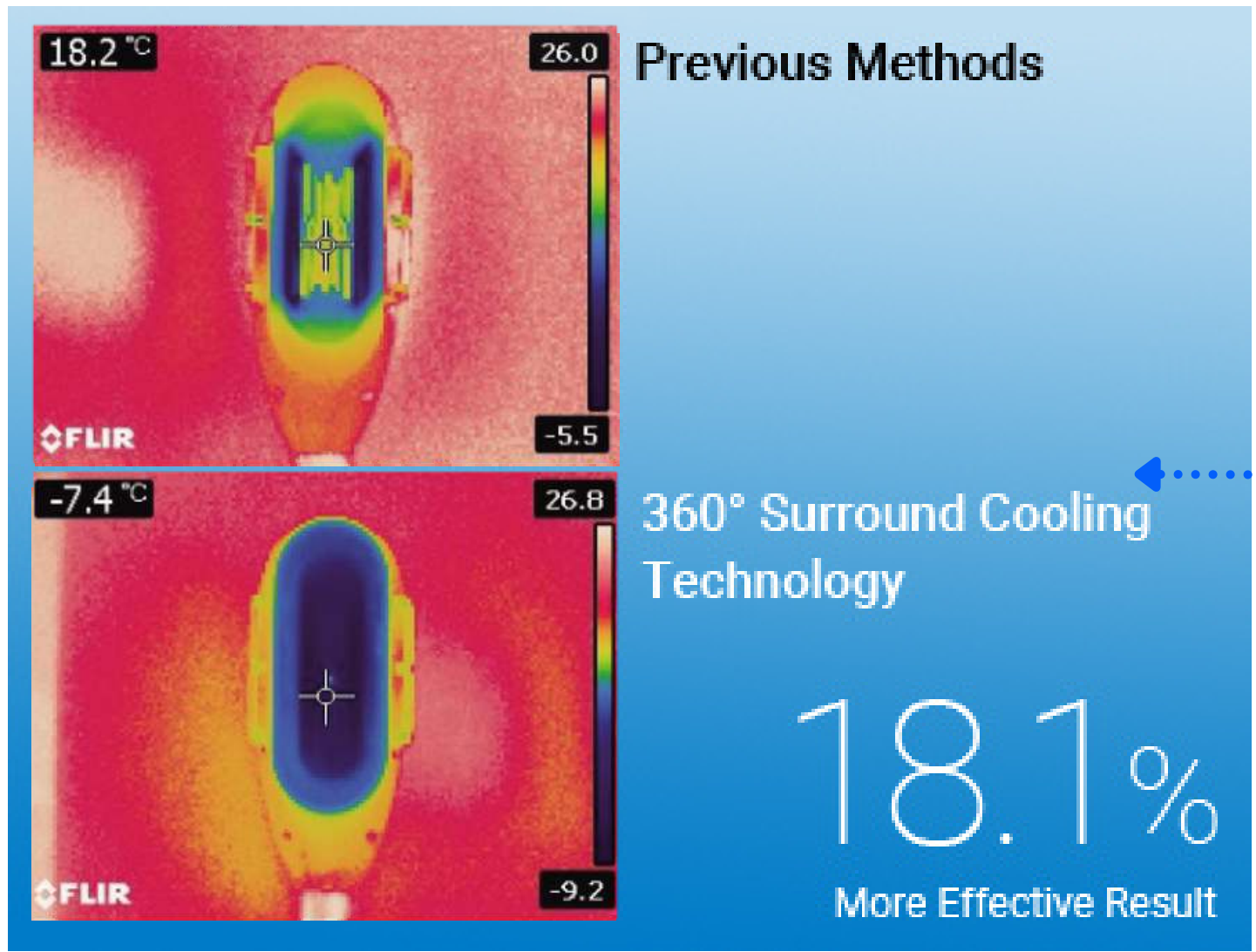

- **Enfriamiento de 360°**
Mejor efecto refrescante y menor tiempo de tratamiento.
- **Silicona líquida**
Tacto suave y tierno como la piel del cuerpo.
- **Temperatura dual**
Patente exclusiva que garantiza seguridad y eficacia.

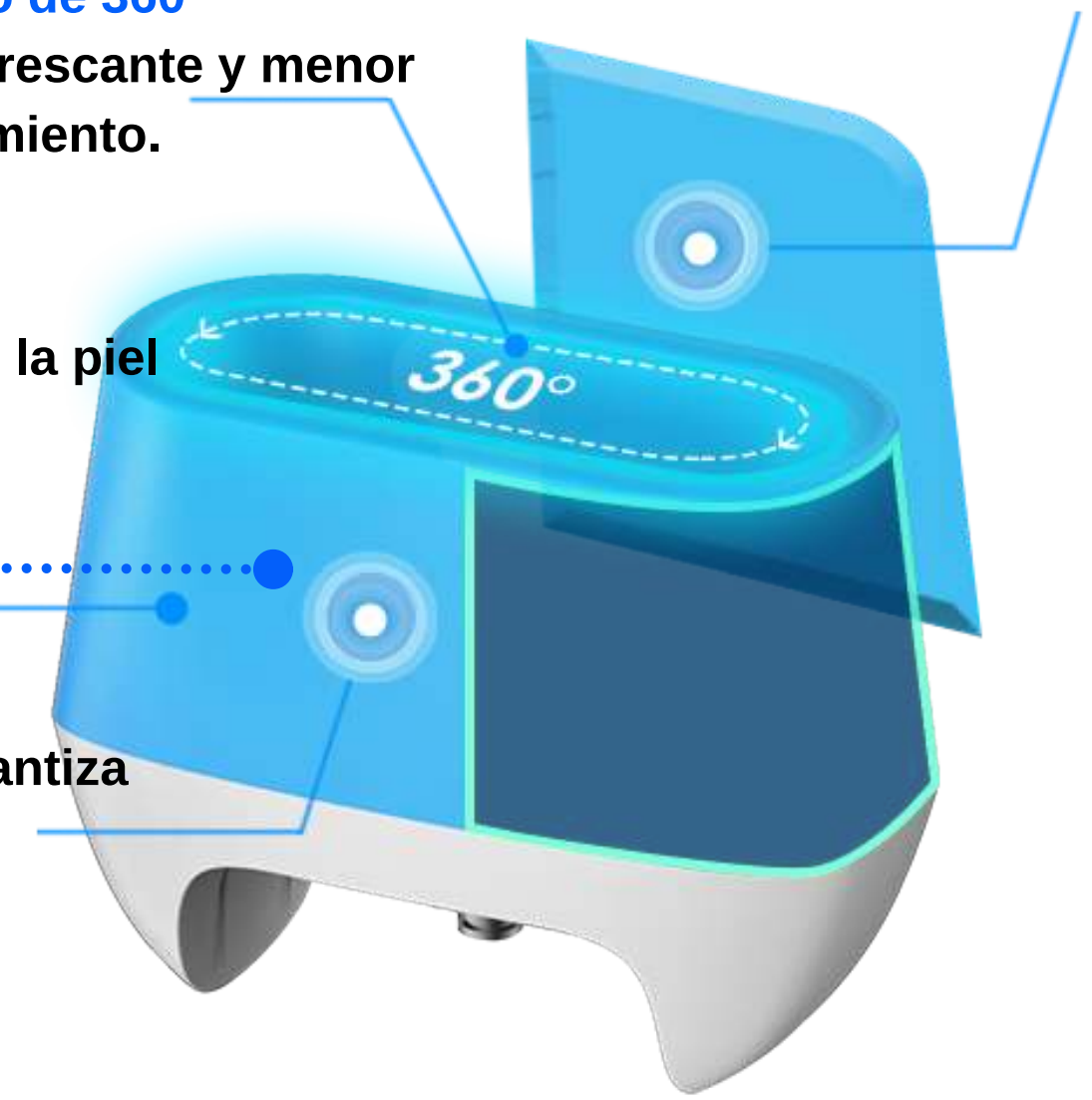


La tecnología de enfriamiento envolvente de 360°, a diferencia de los métodos de enfriamiento convencionales de dos lados, aumenta la eficiencia hasta en un 18,1%. Permitiendo la entrega de enfriamiento a toda la taza y, como resultado, elimina las células grasas de manera más efectiva.

COOL GLAMOR™ 7D Criolipólisis de 360°

Pantalla táctil de 15.6" pulgadas

Toda la carcasa de la máquina tiene molde de inyección, muy agronómico y lujoso.

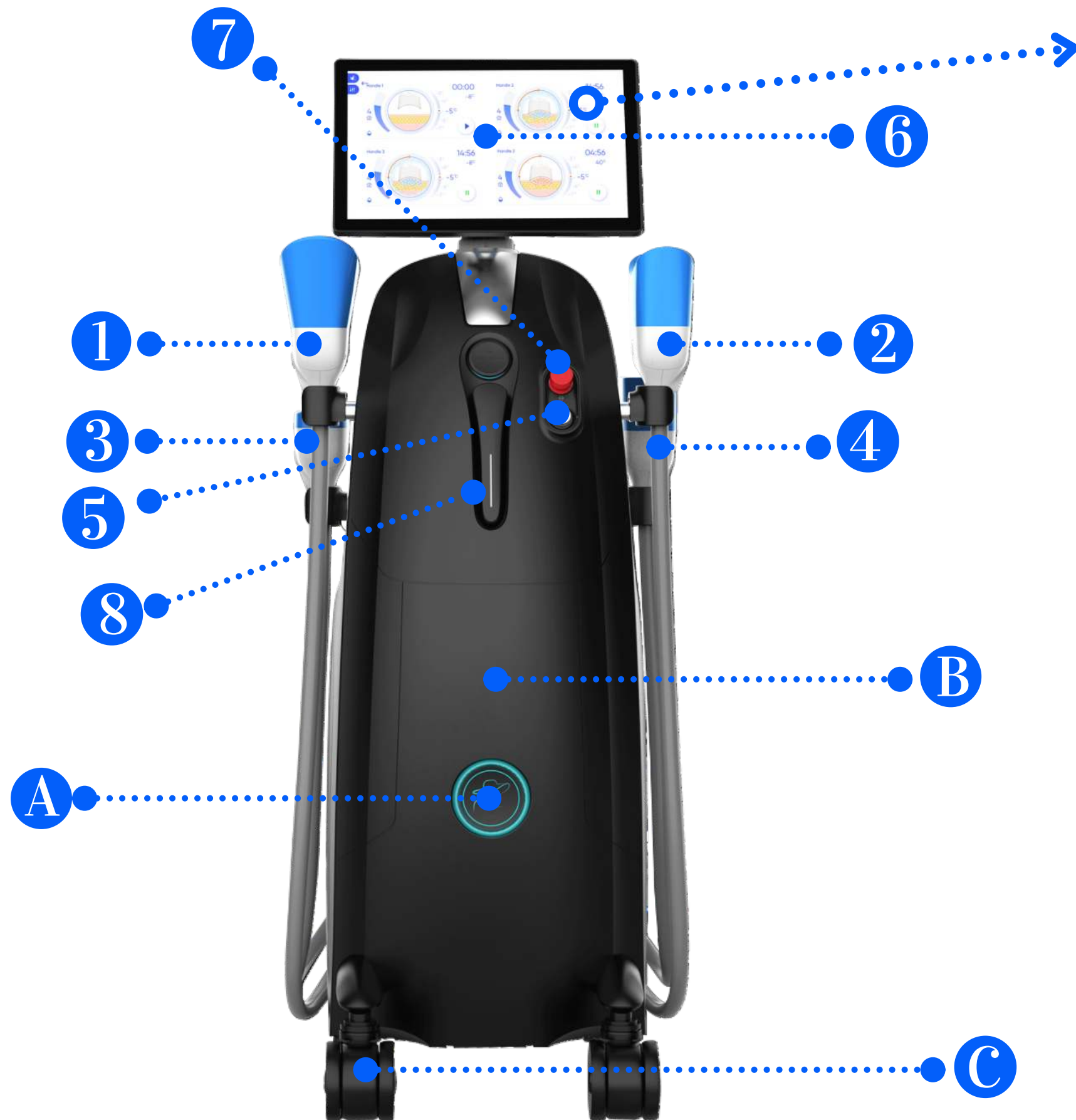


- 1. 1er aplicador de criolipólisis de 360°
- 2. 2.º aplicador de criolipólisis de 360°
- 3. 3er aplicador de criolipólisis de 360°
- 4. Cuarto aplicador de criolipólisis de 360°
- 5. interruptor de llave
- 6. Pantalla táctil
- 7. Botón de parada de emergencia
- 8. Titular
- A. luz LED
- B. Cuerpo de la máquina
- C. Rueda universal

Modo de funcionamiento automático



■ Reposabrazos ocultable

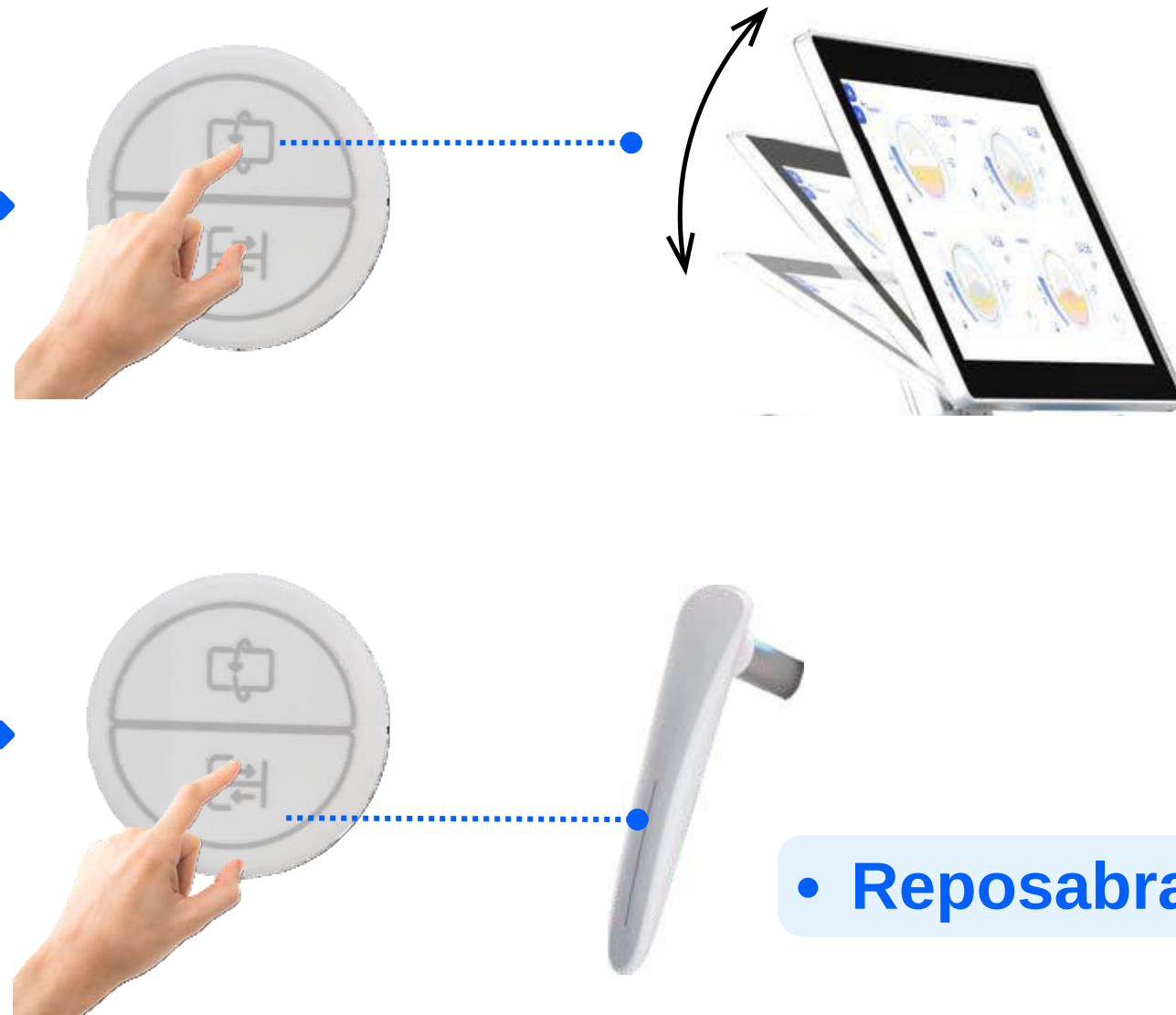

• Rotación de 90°

• Reposabrazos ocultable

Modo de funcionamiento automático:

La pantalla de 15.6 pulgadas se puede levantar y girar automáticamente con un botón. El reposabrazos ocultable automático con un botón, cómodo y bonito.

* 4 aplicadores simultáneos

El diseño exclusivo de **COOL GLAMOR™** permite trabajar con 4 aplicadores simultáneamente, reduciendo el tiempo de tratamiento y favoreciendo la comodidad del paciente, ya que en tan solo una sesión podrás reducir 4 zonas, obteniendo un efecto más visible y homogéneo.

Las múltiples zonas del cuerpo que se pueden tratar con **COOL GLAMOR™** y sus aplicadores especiales es otra de las enormes ventajas de este equipo, ya que se puede realizar un contorno de cuerpo completo en tan solo unas pocas sesiones.



4

Área simultáneamente
&
Ahorre tiempo y dinero


✦ 4 aplicadores simultáneos



 4 aplicadores simultáneos



7 tazas de enfriamiento envolventes de 360° diferentes

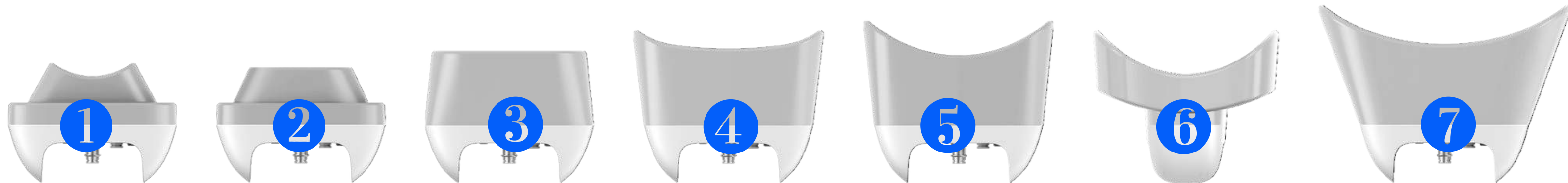


7 copas de enfriamiento de 360° de diferentes tamaños para diferentes áreas del cuerpo para un contorno máximo y personalizado, resultados garantizados.

- **1. Wring mini taza** para el centro del mentón inferior, axila y rodillas.
- **2. Flat mini taza** para mentón inferior lateral, axila, rodillas.
- **3. Flat taza** para abdomen, brazos, muslos internos.
- **4. Wing taza** para abdomen, flancos, michelines.
- **5. Wing Plus taza** para abdomen, línea de sujetador, flancos, michelines, debajo de las nalgas.
- **6. Arc-T taza** para muslos externos, muslos internos.
- **7. Wing Max taza** para abdomen, flancos, michelines.

 7 tazas de enfriamiento envolventes de 360° diferentes

Tamaño de 7 vasos de enfriamiento envolventes de 360° diferentes:

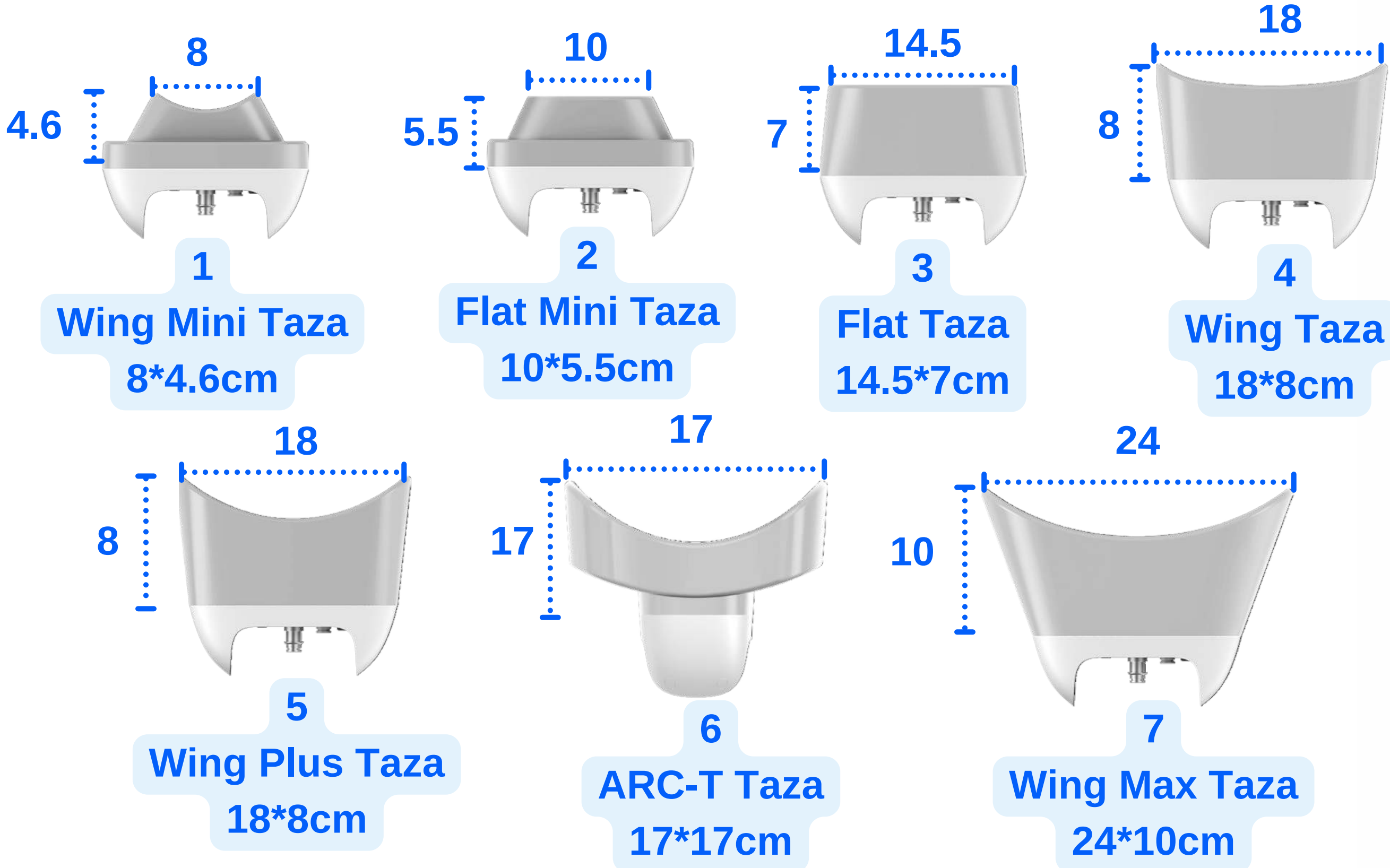

 7 tazas de enfriamiento envolventes de 360° diferentes



1



2



3



4



5







6





7

❄️ ¡Caja de paquete de tazas de enfriamiento!

- ¡Cada vaso refrigerante envolvente de 360° tiene su propia caja de embalaje!

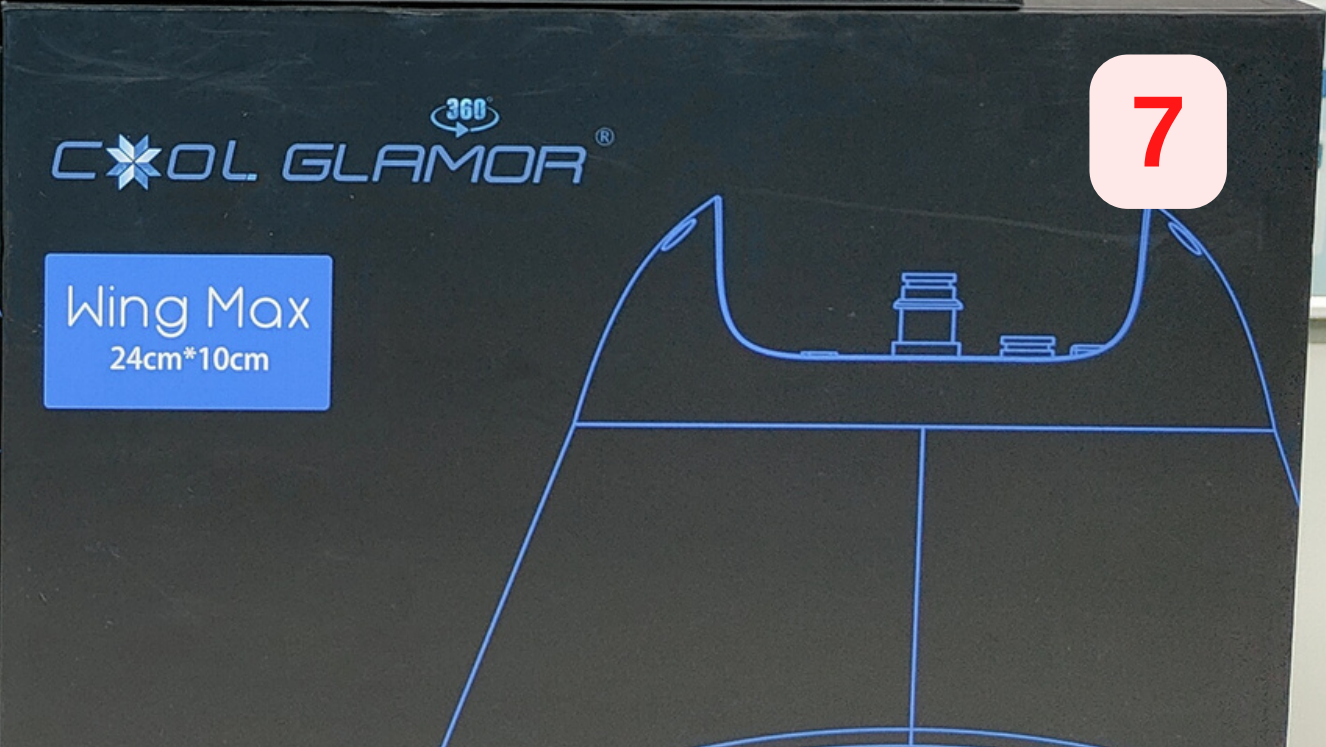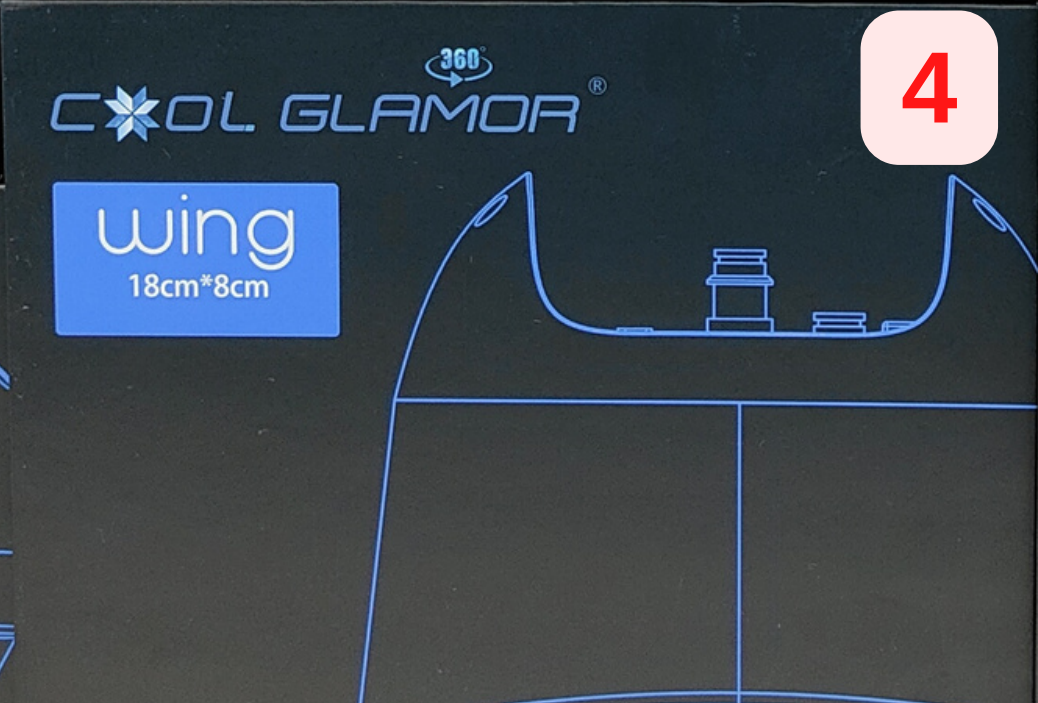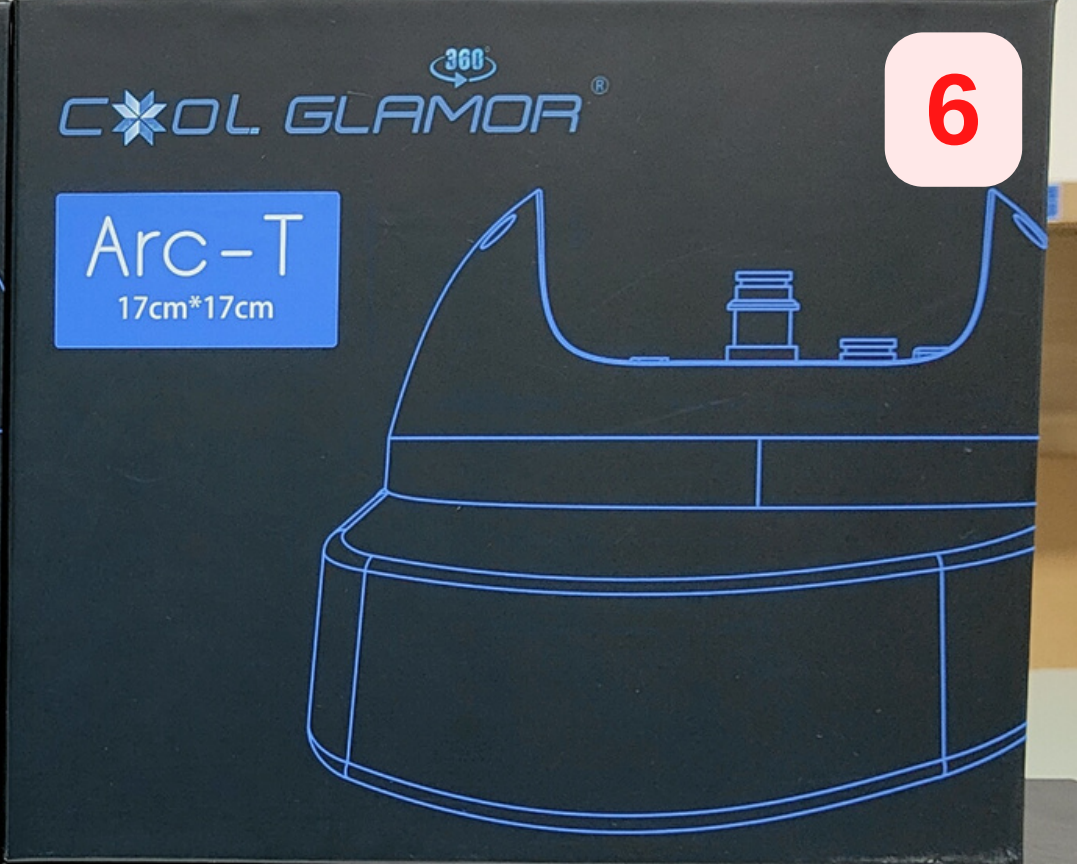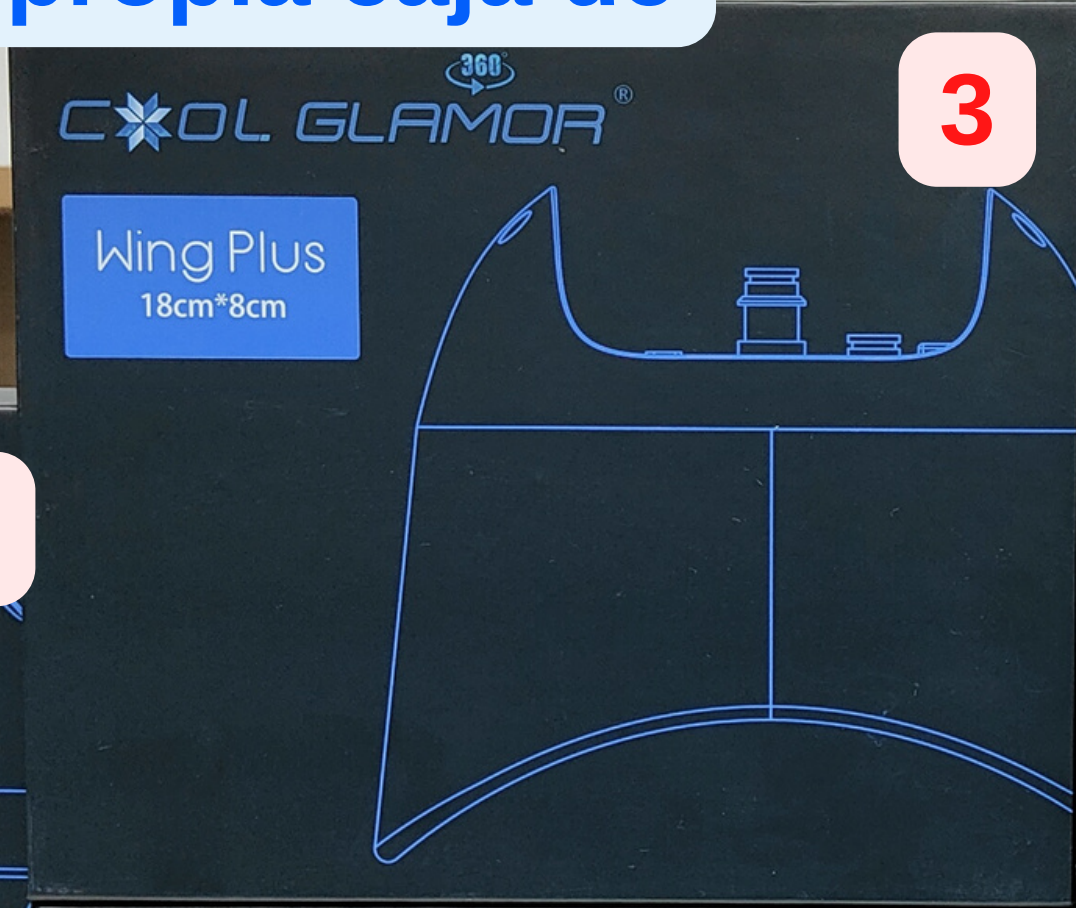

Calibradores para el tratamiento.

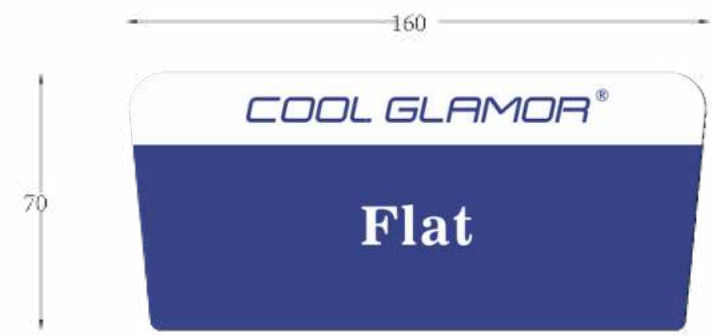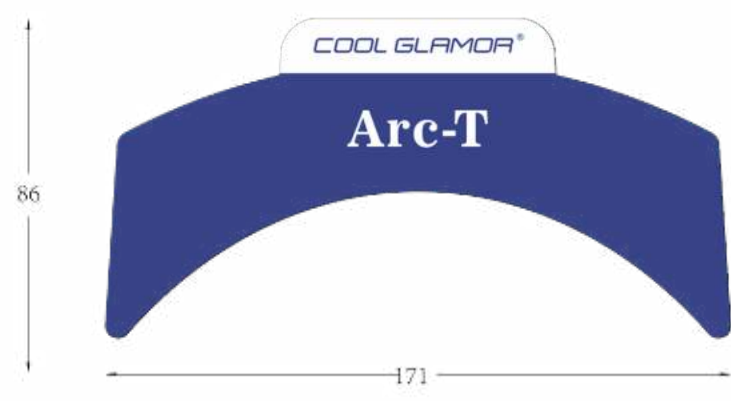

• Color azul



• Wing max para tratamiento de abdomen.

• Color gris



• Wing mini para tratamiento de papada.

Intercambio de aplicadores rápido y sencillo

Con un simple mecanismo de presionar y soltar, los usuarios pueden cambiar las tazas de enfriamiento durante un solo tratamiento.



 Intercambio de aplicadores rápido y sencillo

Fácil & Conveniente



interruptor de bloqueo

 Intercambio de aplicadores rápido y sencillo



COOL GLAMOUR™ 7D Área de tratamiento de criolipólisis de 360°

COOL GLAMOR™ 7D 360° Cryolipolysis funciona bien para apuntar a la grasa subcutánea que se encuentra justo debajo de la superficie de la piel. Suele ser del tipo que sobresale en la piel y se puede pellizcar o apretar fácilmente. Un tratamiento Cool Glamour puede tratar estas diferentes áreas con depósitos de grasa rebeldes:

- **Muslos internos y externos:** el procedimiento de congelación de grasa puede ayudar a lograr un espacio interno en los muslos y eliminar las antiestéticas alforjas.
- **Abdomen:** El área del estómago y los abdominales son uno de los lugares comunes donde el cuerpo almacena grasa y Cool Glamour puede ayudar a eliminar el tejido adiposo para tonificar y adelgazar la parte superior del cuerpo.
- **Caderas:** La grasa que se acumula alrededor de las caderas y la cintura también se llama comúnmente flancos o michelines.
- **Grasa del sostén:** Estas son las bolsas de grasa que aparecen abultadas debajo de las axilas.
- **Grasa de espalda:** Cool Glamour también es un tratamiento eficaz para eliminar la grasa corporal que se desarrolla en la zona superior, media e inferior de la espalda.
- **Glúteos:** También se pueden formar bolsas de grasa no deseada debajo de los glúteos y dar lugar a lo que normalmente se conoce como "rollitos de plátano".
- **Parte superior de los brazos:** También se ha demostrado que la grasa flácida en la parte superior de los brazos responde bien al tratamiento Cool Glamour.

✦ Mini para papada

Aplicadores duales para tratamientos especializados

• 1. Wing Mini



Centro inferior del mentón



• 2. Flat Mini



Barbilla inferior lateral



• 1. Wing Mini



• 2. Flat Mini



ARC-T para muslos

Accesorio multiángulo para piernas y caderas delgadas y contorneadas

- 3. ARC-T



Delantero



Atrás



Exterior



Interno

• 3. ARC-T



- **4. WING para grandes bolsas de grasa**



Abdomen, Flancos,
Michelines.



- **5. WING Plus para pequeñas bolsas de grasa**



Abdomen, línea del
sostén, flancos,
michelines, debajo
de las nalgas.



- **6. WING Max para grandes bolsas de grasa**



Abdomen, Flancos,
Michelines.



- **7. FLAT para pequeñas bolsas de grasa**



Abdomen,
Brazos, Muslos
Internos.



• 4. WING



• 5. WING Plus



• 6. WING Max



• 7. Flat



Software de funcionamiento inteligente de Android



• **Utilice el software Android Smart Operate**

Sistema de control Android de 15.6 pulgadas:

Se adopta el sistema Android y la máquina puede controlarse de forma remota mediante el teléfono móvil, lo que mejora en gran medida la facilidad de operación y mejora la eficiencia del trabajo.



Actualización del sistema de soporte



Admite acceso a internet



Almacenamiento y procesamiento de información del cliente.



Negocio de alquiler

Operar software

Handle 1

00:00

-3°C
-4°C
-5°C
-6°C
-7°C

Manejar 1

Handle 2

14:56

-3°C
-4°C
-5°C
-6°C
-7°C

Manejar 2

El sistema de autolimpieza es muy conveniente para el mantenimiento.

¡4 manijas podrían funcionar al mismo tiempo!

Handle 2

14:56

-3°C
-4°C
-5°C
-6°C
-7°C

Manejar 3

Handle 2


04:56

-3°C
-4°C
-5°C
-6°C
-7°C

Manejar 4

¡4 manijas podrían funcionar al mismo tiempo!

- A: Los aplicadores de patente más nueva cuatro funcionan simultáneamente o por separado con MASSAGE. Trate de 1 a 4 clientes simultáneamente o trate a un cliente con 4 áreas en una sesión. Ahorre enormemente el tiempo del cliente y del operador.
- B: Los parámetros de cada aplicador se pueden ajustar por separado para satisfacer las diferentes necesidades de diferentes partes del cuerpo de diferentes clientes.

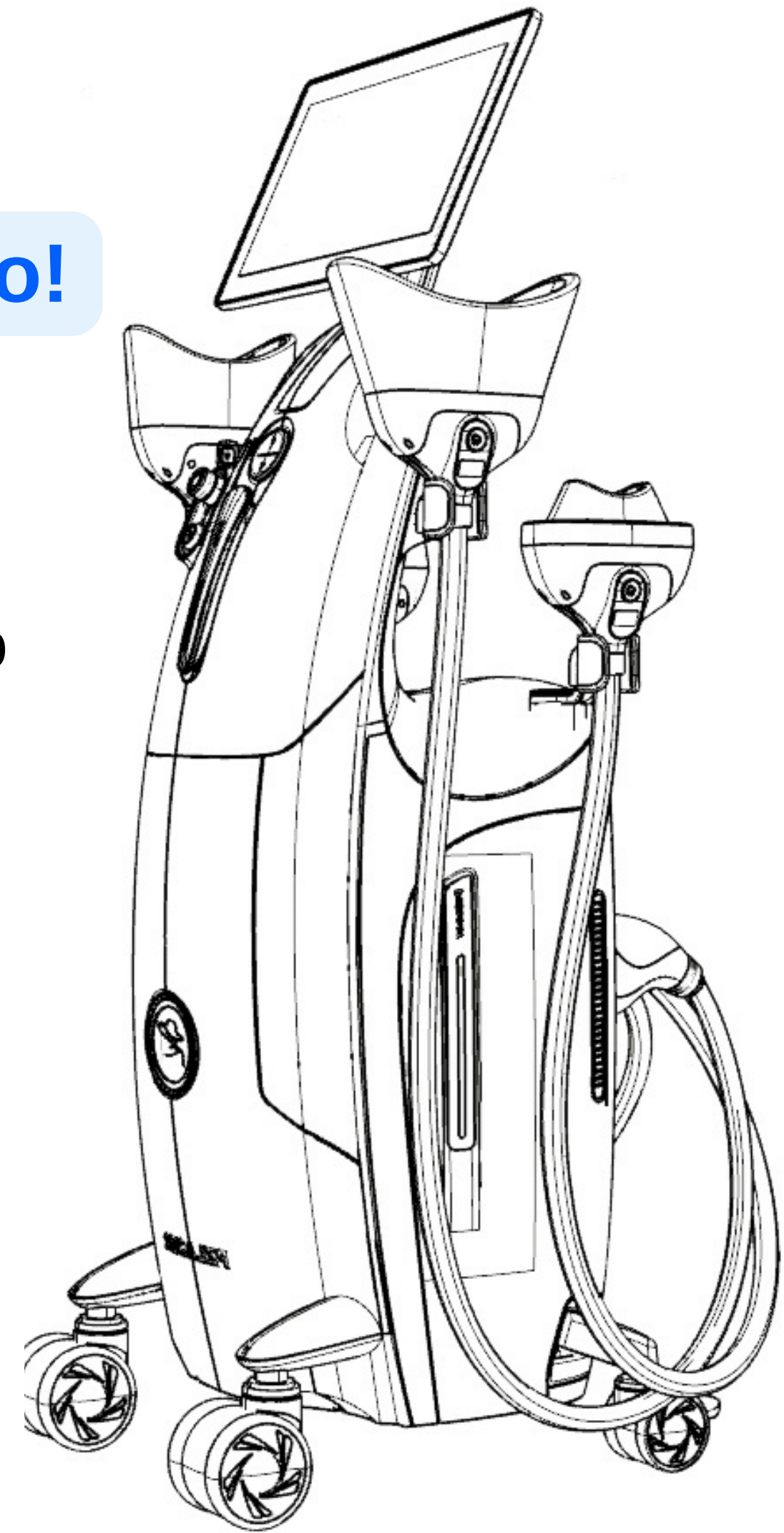

Handle 1

Temperatura:
La temperatura más baja puede ser $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$, sin embargo, recomendamos $-11\text{ }^{\circ}\text{C}$ por seguridad.

08:56



Wing Plus

• Tazas refrescantes




4



20%

Niveles ajustables:


COOL GLAMOUR no solo es capaz de ofrecer una succión un 20% más fuerte, sino que también brinda a los médicos la capacidad de ajustar los niveles de enfriamiento y succión para brindar con confianza tratamientos personalizados a los pacientes.

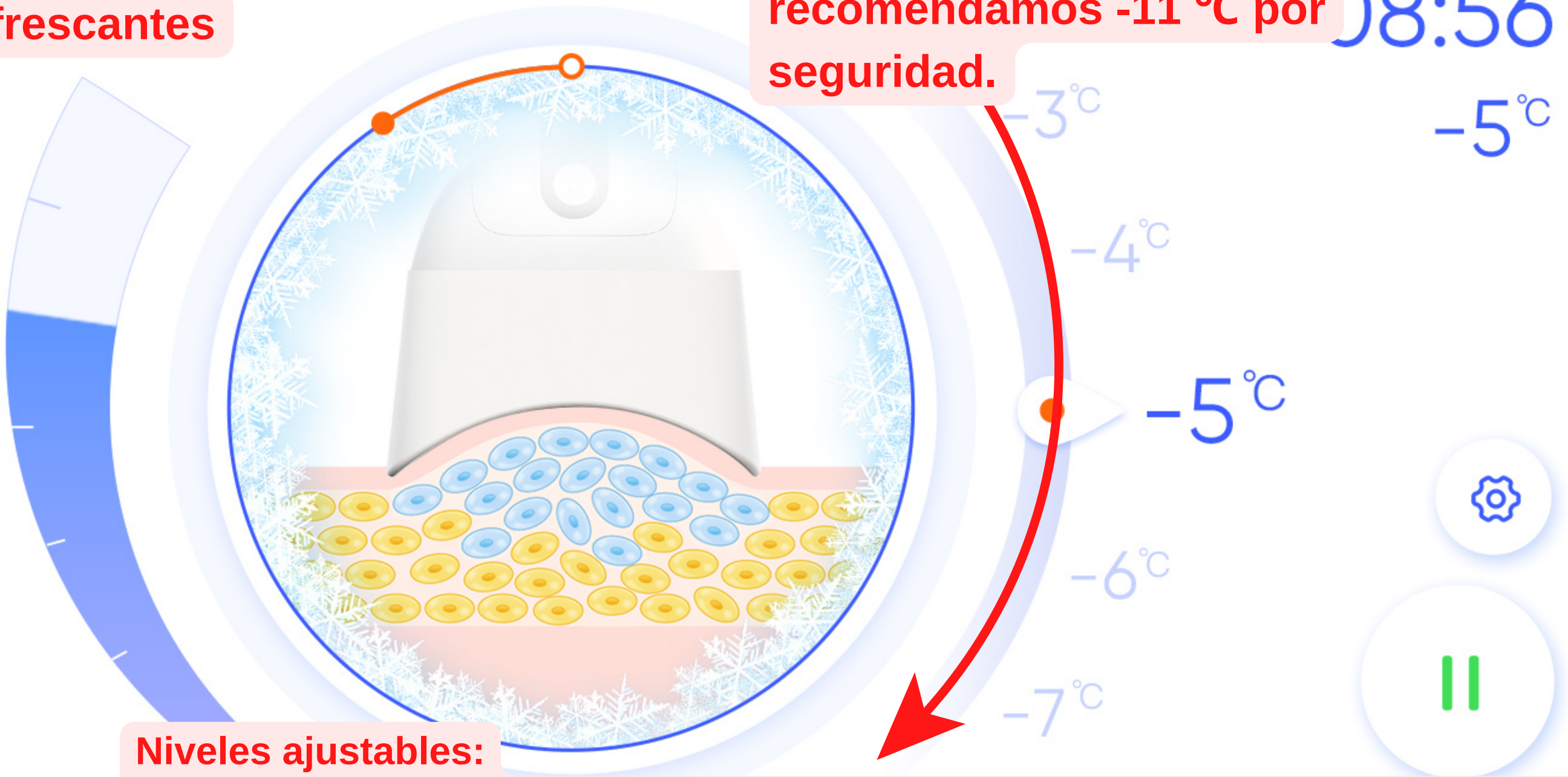

Handle 1

Modo de precalentamiento innovador Physio Temperature:

- El innovador modo de precalentamiento acelerará la circulación sanguínea y el metabolismo, lo que sustituirá al masaje en las manos. Temperatura hasta 42 °C. Mucho más ahorra la fatiga de tus esteticistas. Debido a la enorme diferencia de temperatura de 42 °C en la fase de calentamiento al rango negativo durante la fase de tratamiento, las células grasas están expuestas a un estrés enorme y, por lo tanto, pueden destruirse más fácilmente.

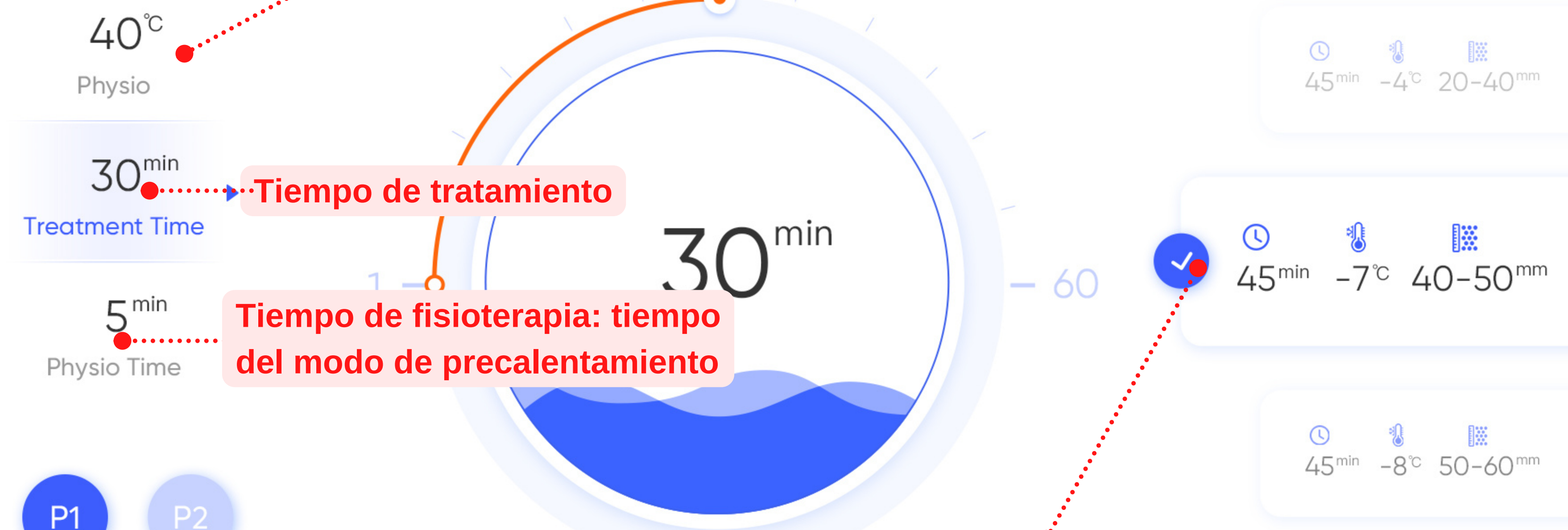

Tiempo de tratamiento

Tiempo de fisioterapia: tiempo del modo de precalentamiento


Tabla de sugerencias: Diferentes espesores utilizan diferentes temperaturas de tratamiento.


Modo de trabajo:

- P1 sin Masaje


- Modo de masaje P2: brinda el tratamiento más cómodo y seguro. Alivia eficazmente la tensión de los músculos superficiales y acelera la circulación sanguínea.

 Fuerte sistema de enfriamiento

 Escarcha

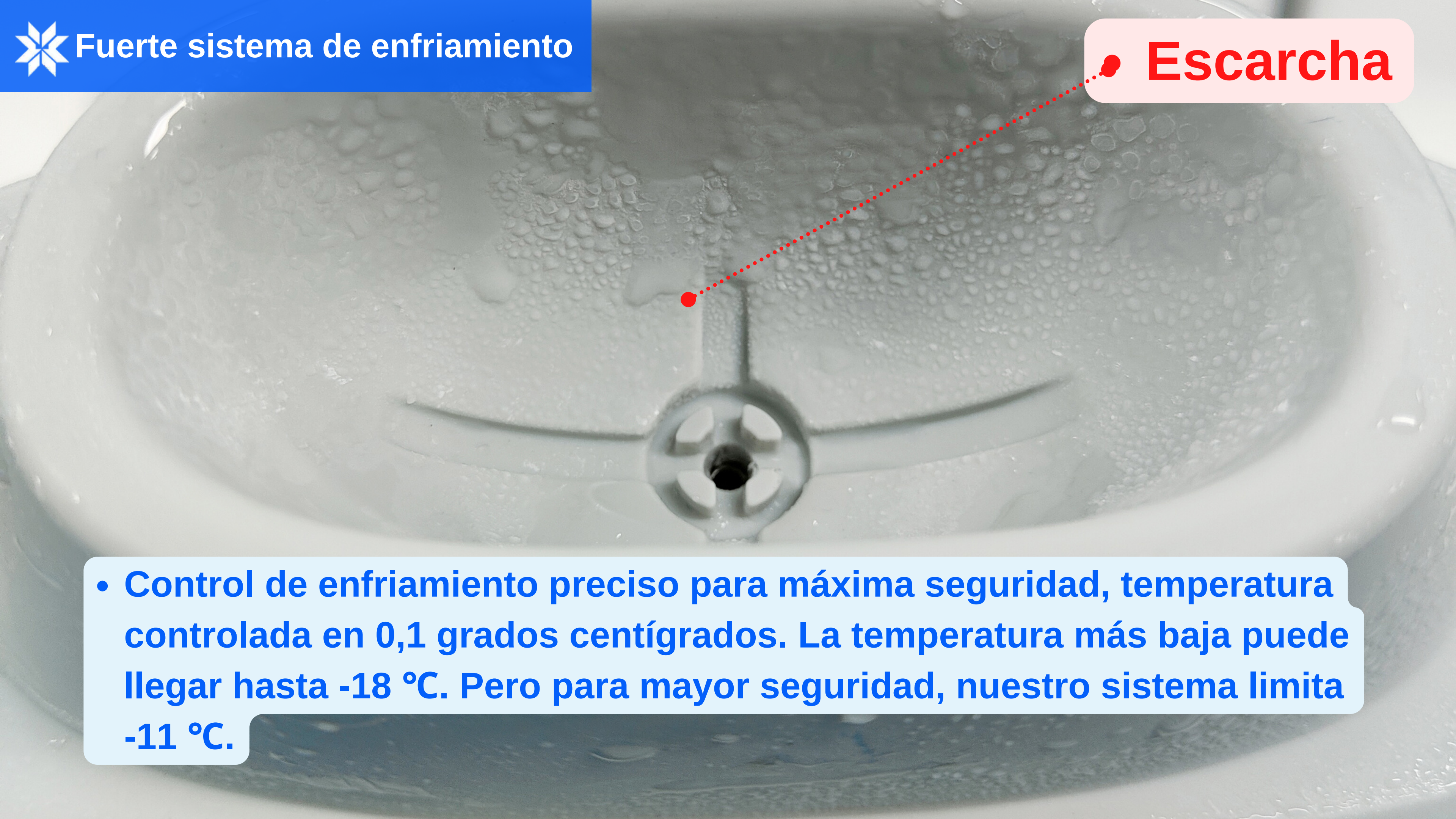

• Control de enfriamiento preciso para máxima seguridad, temperatura controlada en 0,1 grados centígrados. La temperatura más baja puede llegar hasta -18 °C. Pero para mayor seguridad, nuestro sistema limita -11 °C.

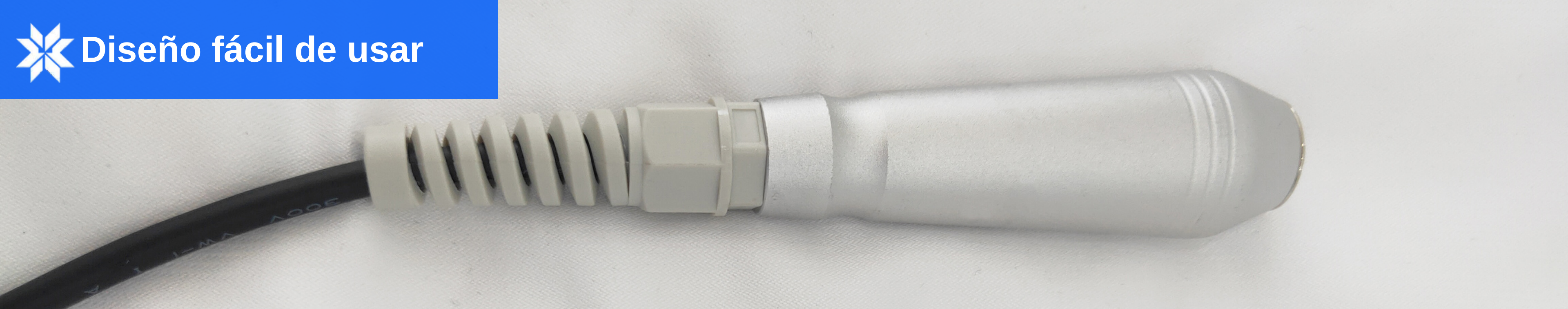- 
- **Parada de emergencia portátil: durante el tratamiento, el paciente debe sostenerlo; cuando no se sienta cómodo, presiónelo y la máquina dejará de funcionar.**

- **Avance de alarma de un minuto cuando finalizó el tiempo de tratamiento.**
- **La parada de emergencia portátil está a su alcance; los clientes podrían activar la parada instantánea debido a cualquier inconveniente.**

- Las tazas de filtro externas y el sistema de autolimpieza son muy convenientes para el mantenimiento, no es necesario abrir la carcasa para limpiarlas.




- Tazas de filtro externas: límpielas una vez por semana.


- **Bomba de aire doble**

1

2

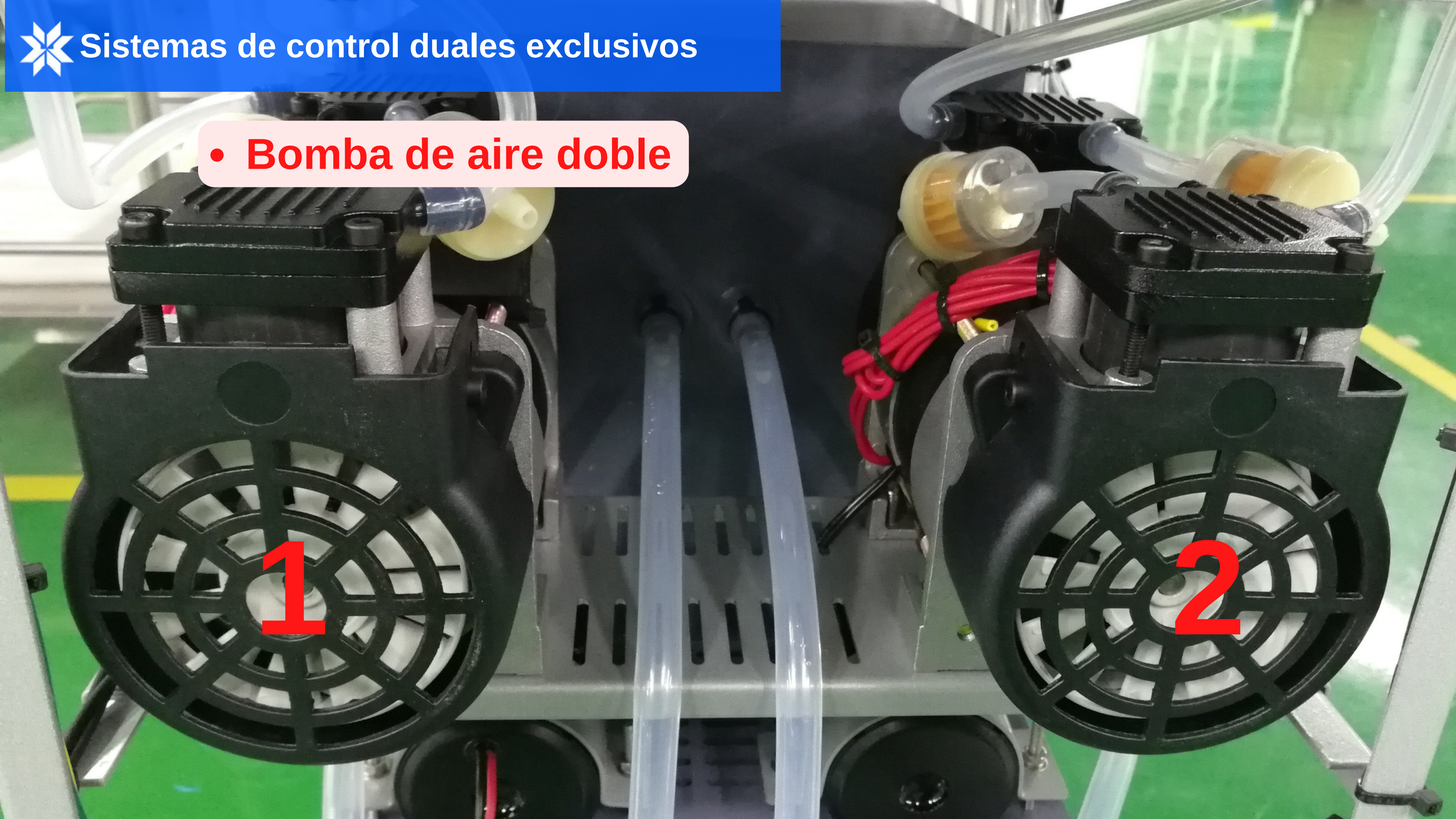

- **Bomba de agua doble**

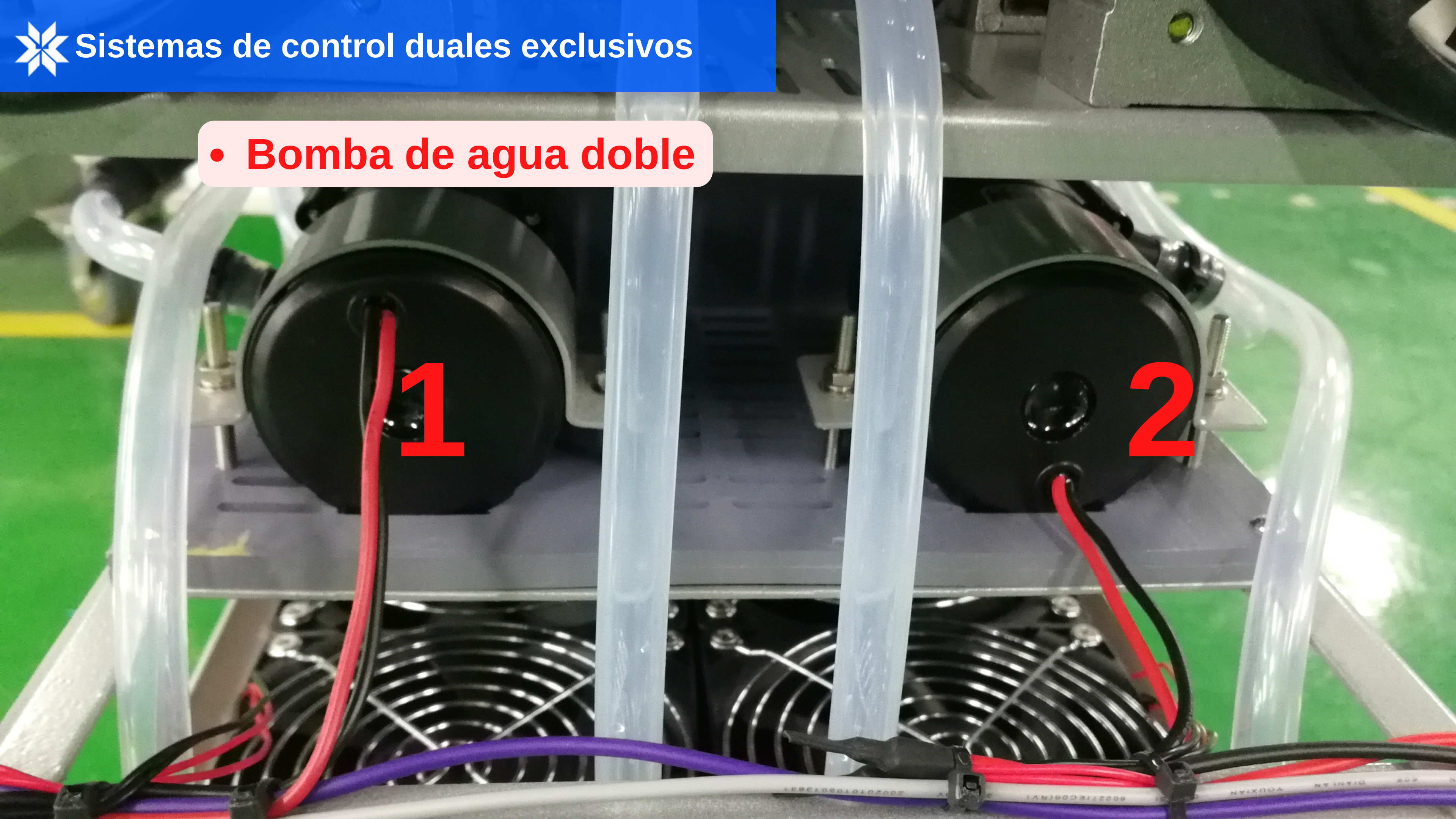

- Doble fuente de alimentación




• **Tablero de control doble**

2

1

15

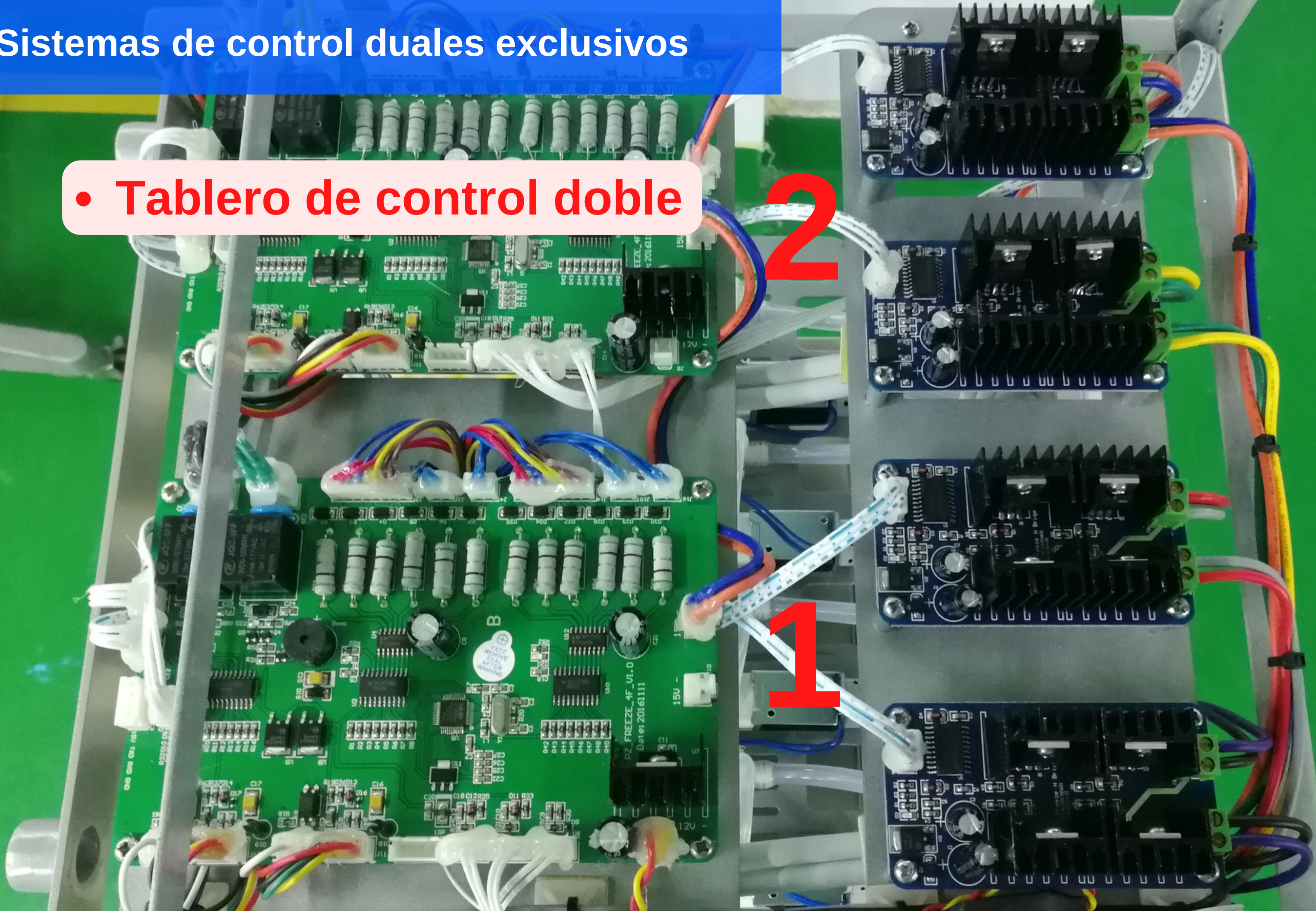



- ventiladores de 4 piezas

✓ ¿Cuántas sesiones de congelación de grasas necesito?

La mayoría de las personas necesitan dos sesiones de Cool Glamour por área específica. Estas sesiones se completan con un intervalo de 6 a 8 semanas. Con dos sesiones de Cool Glamour, muchas personas ven una reducción del 25% en la grasa rebelde.

✓ ¿CON QUÉ FRECUENCIA DEBE RECIBIR TRATAMIENTO?

Si necesita más de un tratamiento, se puede realizar una segunda sesión de criolipólisis con 1 o 2 meses de diferencia entre la primera sesión para darle a los procesos naturales de su cuerpo tiempo suficiente para eliminar las células grasas muertas. El tiempo entre sus sesiones también le brinda suficiente tiempo para evaluar sus resultados y determinar si necesita otro tratamiento para lograr sus resultados.

✓ ¿Qué tan rápido veré los resultados de Cool Glamour?

La rapidez con la que vea los resultados después de su sesión de Cool Glamour variará según la rapidez con la que su cuerpo descomponga las células grasas específicas. Sin embargo, la mayoría de las personas ven resultados a las tres semanas, pero obtienen los mejores resultados tres meses después del tratamiento.



✦ Antes & Después



¿Qué hay en la caja?

- 1. **Cuerpo principal de la máquina.**
- 2. **Aplicadores de 4 piezas.**
- 3. **7 vasos de enfriamiento de 360° de diferentes tamaños:**
1). Wing mini taza 2). Flat mini taza 3). Flat taza 4). Wing taza 5). Wing plus taza 6). Wing max taza 7). Arc-T taza

- 4. **Calibre gordo**
- 5. **Embudo de agua**
- 6. **Soporte de soporte**
- 7. **Línea de alimentación**
- 8. **Tornillo hexagonal número 2**
- 9. **Tornillos número 4**
- 10. **Cabeza CPC blanca**



Especificación técnica

Luz infrarroja	37°C~42°C
Temperatura de modelado fresco	5°C~-11°C
Vacío	10-80Kpa
Luz LED	Rojo (630nm) Verde (570nm) 50mW×4
Aplicadores	¡4 aplicaciones funcionarían al mismo tiempo!
7 tazas de enfriamiento diferentes de 360 °	1. Wing mini, 2. Flat mini, 3. Flat, 4. Wing, 5. Wing plus, 6. Wing Max, 7. ARC-T
Sistema de refrigeración	Wind+Water +Peltier
Tamaño de copas	Flat mini: 10*5.5cm, Wing mini: 8*4.6cm, Flat: 14.5*7cm, Wing: 18*8cm, Wing Plus:18*8cm, Wing Max: 24*10cm, Arc-T: 17*17cm
Fuente de alimentación	AC230V,50Hz / AC110V, 60Hz
Temperatura de trabajo	+15°C~+30°C
Presión atmosférica	86kPa~106kPa
Temperatura de almacenamiento	-20°C~+55°C
Tamaño del paquete	124*52*62cm
Peso neto	75kg



COOL GLAMOR™ 7D 360° Criolipólisis

Freeze ON! Fat OFF!

[Ordenar ahora](#)



Microkits.cl
Servicios Tecnológicos

